



Sådan applicerer du AutoSoft 30

AutoSoft™ 30 er et infusionsæt med et blødt silikonekateter som indsættes i en 30 graders vinkel.

OBS! Vælg et indstikssted, som din behandler har anbefalet. Vælg et område lidt væk fra det sidst anvendte indstikssted. Husk at vaske hænder, inden du anvender AutoSoft 30. Rengør huden efter din behandlers anbefalinger. Sørg for at området er rent og tørt, inden AutoSoft 30 appliceres.



Træk i det røde bånd for at fjerne forseglingen og åbne dit AutoSoft 30 infusionsæt. Fjern det sterile papir.

BRUG IKKE infusionsættet, hvis forseglingen eller det sterile papir er brudt eller beskadiget.



Hold imod på applikatorens rillede områder med den ene hånd, og træk låget af med den anden.



Aktivér applikatoren ved at placere fingrene på rillerne på hver side af applikatoren. Træk fjederen udad med den anden hånd, indtil du hører et "klik".



Hvis nålebeskytteren ikke er faldet af af sig selv, fjern den da forsigtigt, inden du udløser applikatoren.

VÆR FORSIGTIG, så du ikke berører eller bøjer indføringsnålen.



Sørg for at tapen ikke sidder fast på indføringsnålen.

KONTROLLER at du ser indføringsnålen af stål stikke ud af det bløde silikonekateter, inden du udløser applikatoren.



For at sikre en vinkel på 30 grader, skal den vinklede del af benene placeres plant mod huden. Placer pegefingeren på oversidens udløserknop, og tommelfingeren på undersidens udløserknop.



Tryk forsigtigt én gang for at udløse applikatoren og indføre kateteret.



Placer forsigtigt fingeren på den gennemsigtige rude og træk forsigtigt applikatoren lige tilbage.



Når applikatoren er fjernet, bliv da ved med at holde fast med en finger på den gennemsigtige rude. Fjern herefter forsigtigt beskyttelsespapiret under kanylehuset, som vist på billedet. Pres forsigtigt tapen på undersiden af kanylehuset mod huden.



Fjern beskyttelsespapiret under den forreste del af tapen under kanylehuset. Masser tapen på indstikket, så god vedhæftning sikres.

FORSØG IKKE at rette tapen ud, hvis det er krøllet.



Fastgør slangen til reservoirs t:lock kobling. Drej med uret indtil du møder modstand, drej herefter en kvart omgang til for at sikre, at den er korrekt tilsluttet.



Fjern den runde nålebeskytter fra konnektoren.

13



Fyld slangen med insulin i henhold til insulinpumpens brugsanvisning.

Infusionssættet **MÅ IKKE** være tilsluttet kroppen, mens slangen fyldes.

14




Lad konnektornålen pege nedad, mens slangen fyldes. De omtrentlige fyldningsmængder er 10-15 enheder for 60 cm slange og 20-25 enheder for 110 cm slange. Stop, når der er kommet 3 dråber insulin fra konnektornålen.

15



Tilslut slangen til infusionssættet ved at holde i de riflede sider på konnektoren og tryk den ind i kanylehuset.

16

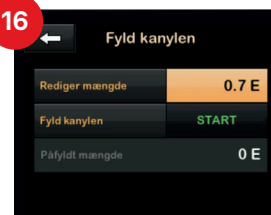

Fyld kanylen med 0,7 enheder.

Sæt låget tilbage på applikatoren, inden du bortskaffer den.

KONTROLLER ALTID blodsukkeret 1-2 timer efter applicering for at sikre, at infusionssættet fungerer, som det skal.

Sådan kobler du fra og til

1



Placer din finger foran kanylehuset, pres forsigtigt på siderne af konnektoren og træk konnektoren lige ud.

2



Hold i siderne af konnektoren og før den ind i kanylehuset. Du skal kunne høre et "klik".



Scan koden og se filmen om, hvordan du applicerer infusionssættet AutoSoft™ 30.

Dette materiale er en forkortet version hentet fra AutoSoft™ 30 brugsanvisning. Se venligst brugsanvisningen for komplet information.